

# PRE-CLEANING STATION

プレクリーニング ステーション


完全閉鎖型システムシンク



## 各種モジュールが一線上に設計されている システムシンク

### 業界初の完全閉鎖型を採用

用手洗浄業務を実施のスタッフを暴露感染から守ります

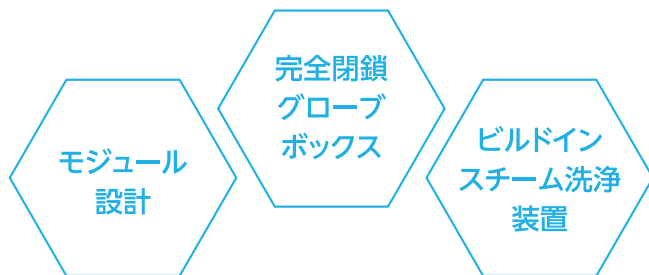

### モジュール設計

1 槽目

すすぎ  
モジュール

+

2 槽目

スチーム洗浄  
モジュール

+

3 槽目

循環 (恒温) 槽  
モジュール




モジュールは、1槽式～4槽式までの範囲で設計可能  
シンクの幅・奥行・深さなど全てオーダーメイドが可能

自由な設計が可能です。2槽式から3槽式までのシンクやエアージェン・ウォーターガン・恒温槽・ビルドインタイプスチーム洗浄などのモジュールを組み合わせたことができます。

# PRE-CLEANING STATION

## 完全閉鎖型システムシンク


### 完全閉鎖グローブボックス

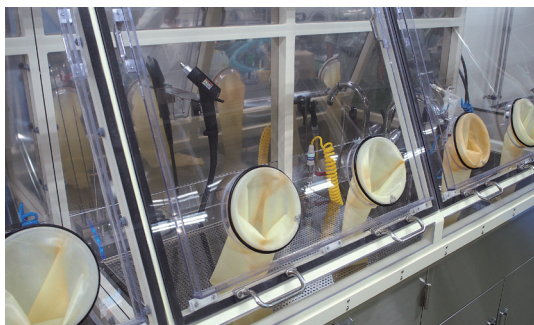

#### 洗浄業務で発生する感染リスクを低減

完全閉鎖型のグローブボックスを採用することにより、予備洗浄業務で発生する暴露（飛び跳ね・吹き戻し）による感染を防ぐことができます。

消毒を実施する前に行う予備洗浄作業は、感染と隣り合わせにあり業務を実施するスタッフに安全に洗浄業務を行って頂くことが重要な事項になり業務感染リスクの低減にも繋がります。

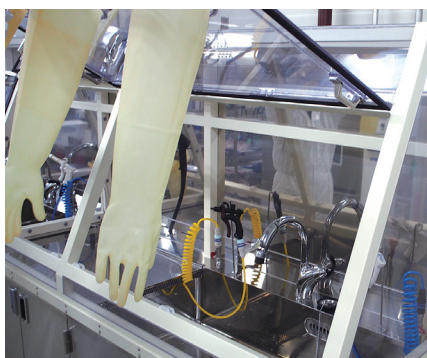


### ビルドインスチーム洗浄装置

#### NBN-111-AS100スチーム洗浄装置をビルドイン可能

様々な内腔のある機器は、専用洗浄ブラシを使用しても再現性のある洗浄を実施する事が難しい業務になっていました。この問題をクリアするために、内腔機器専用に開発された8種類の専用の洗浄ノズルを用いることで機器の洗浄チャンバーに合わせた効果的な洗浄が可能で。また、ブラッシング洗浄では洗浄不良が発生していたポイントにも効率良く蒸気を送り込み洗浄ができるため、汚れを内腔より根こそぎ除去できます。

- NBN-111-AS100は、高性能蒸気式洗浄装置
- 連続使用時でも洗浄温度低下を起しません
- 洗浄剤を使用しないエコ洗浄システム
- 8種類の専用洗浄ノズルで様々な形状の機器に接続でき最適な洗浄が可能
- カートリッジ式給水タンク採用により濁水時の連続使用も可能
- 軟水器を内蔵しているため、水道水を使用してもスケールが蓄積しません
- フットスイッチとスチームノズルのどちらからでもスチーム操作が可能

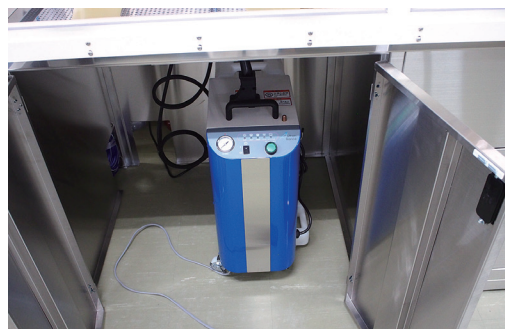

#### NCC株式会社 FIクリーン事業部

〒570-0032 大阪府守口市菊水通4-1-3  
TEL.06-6780-4688 FAX.06-6780-4695  
オーダー専用 FAX.0263-57-2600

www.ncc-medical.com

担当： \_\_\_\_\_